


Visbody-M30

3D-СКАНЕР ТЕЛА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

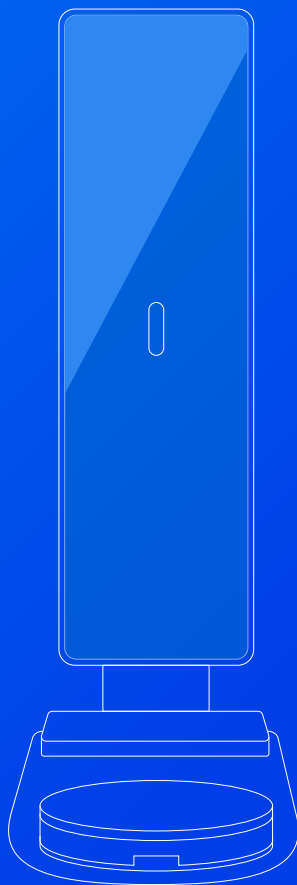

VISBODY

Часть 1 Описание устройства

1. Функции устройства	02
2. Допустимые параметры	06
3. Технические характеристики	06

Часть 2 Сборка устройства

1. Распаковка устройства	07
2. Установка устройства	09
3. Сборка устройства	09
4. Подключение принтера	12

Часть 3 Подготовка к эксплуатации

1. Регистрация	13
2. Управление облачным сервисом	17
3. Запуск устройства	19

Часть 4 Инструкции

1. Условия эксплуатации	19
2. Инструкции по эксплуатации	20
3. Форма отчета	21
4. Печать отчета	24

Часть 5 Функции и обновления

1. Настройка звука	25
2. Настройка яркости экрана	26
3. Пользовательские режимы	26
4. Настройка режимов печати	27
5. Использование кнопок	28
6. Диагностика устройства	28
7. Выбор языка	29
8. Формы отчетов	29
9. Обновления	30

| Часть 1

Описание устройства

Visbody-M30 — это 3D-сканер параметров тела и осанки, работающий при помощи искусственного интеллекта. Создавая оптическую 3D-модель посредством вращения механической платформы и проводя биоимпедансный анализ на основе данных импульса конечностей от датчиков стартовой платформы, он предоставляет пользователям точную информацию о форме тела, осанке, составе тела и окружности тела.


1.Функции устройства

3D-сканер тела Visbody-M30 может производить следующие измерения:

ИИ-оценка осанки

Visbody-M30 использует технологию 3D-определения ключевых точек для выполнения ИИ-оценки осанки в 9 позициях в трехмерном пространстве с точностью до миллиметра и моделирует реалистичные 3D-модели человека.


Отклонение головы вперед, наклон головы, круглые плечи, антеролистез таза, перекос плеч, анализ формы ног (оценка формы ног X/O/K/D), оценка коленного сустава (гиперэкстензия ↔ контрактура) и типа ног (тип ног X/O/D/K).

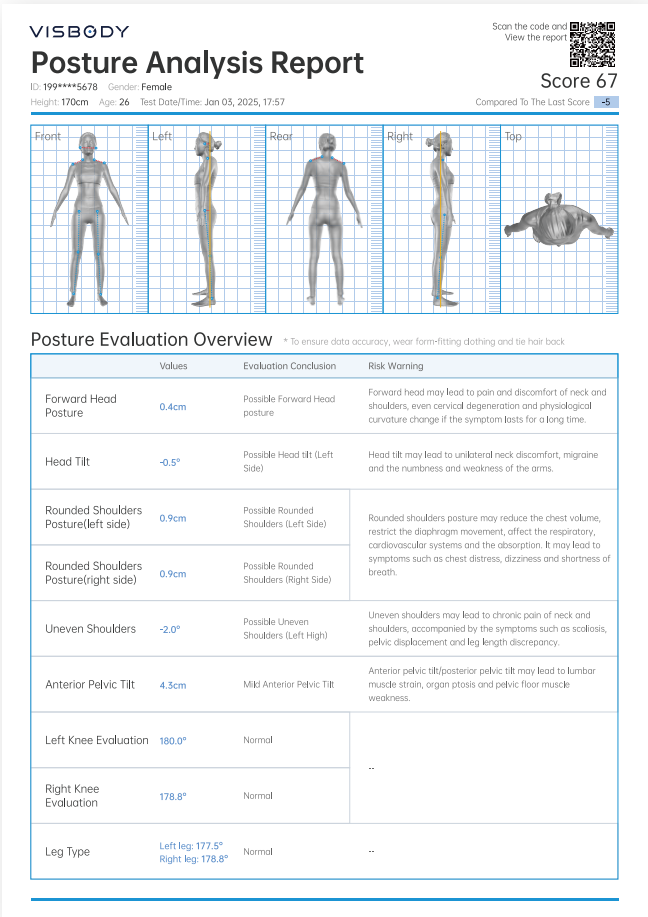

Оценка окружности тела

Visbody-M30 производит считывание параметров в течение 30 секунд и создает реальную 3D-модель человеческого тела на 360° с 13 измерениями обхвата тела и точным воссозданием 3D-модели осанки.


Окружность шеи, левое плечо, правое плечо, грудная клетка, высокая посадка талии, средняя посадка талии, низкая посадка талии, линия бедер, левое бедро, минимальная окружность левого бедра, правое бедро, минимальная окружность правого бедра, окружность левой голени, окружность правой голени.

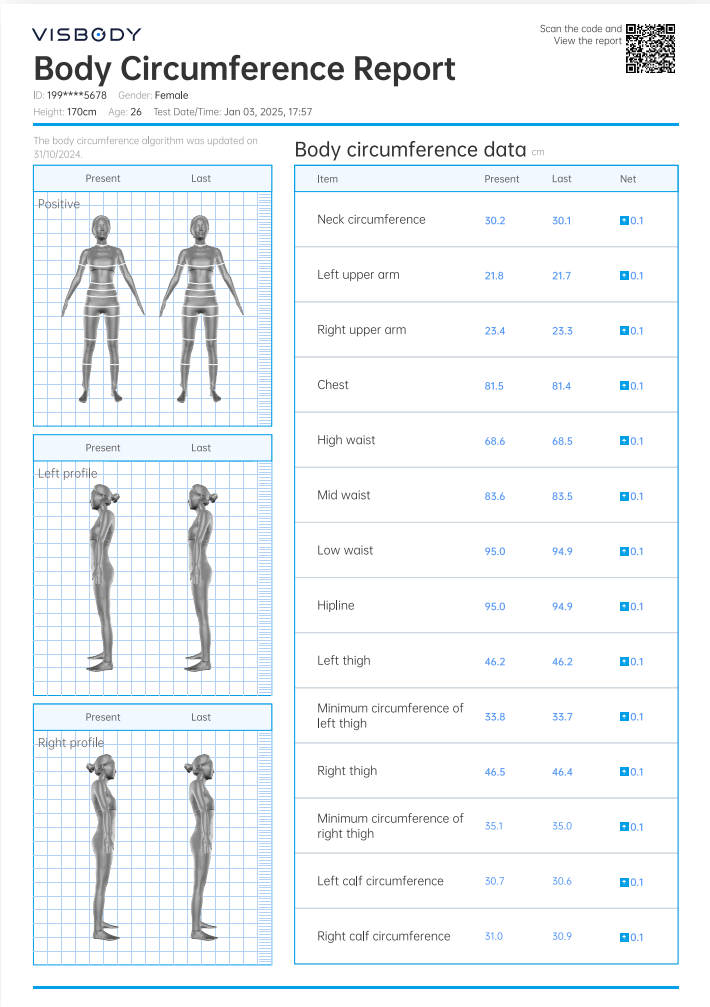

Динамическое отслеживание

Visbody-M30 использует технологию динамического отслеживания для оценки диапазона движения плеч в разных направлениях, указывая пользователю на возможные проблемы в ограничении подвижности суставов. Такая информация может помочь предотвратить спортивные травмы, улучшить физические результаты и в целом качество жизни.


Чтобы убедиться, что плечи функционируют штатно, анализируется отведение-супинация и сгибание-супинация вперед.

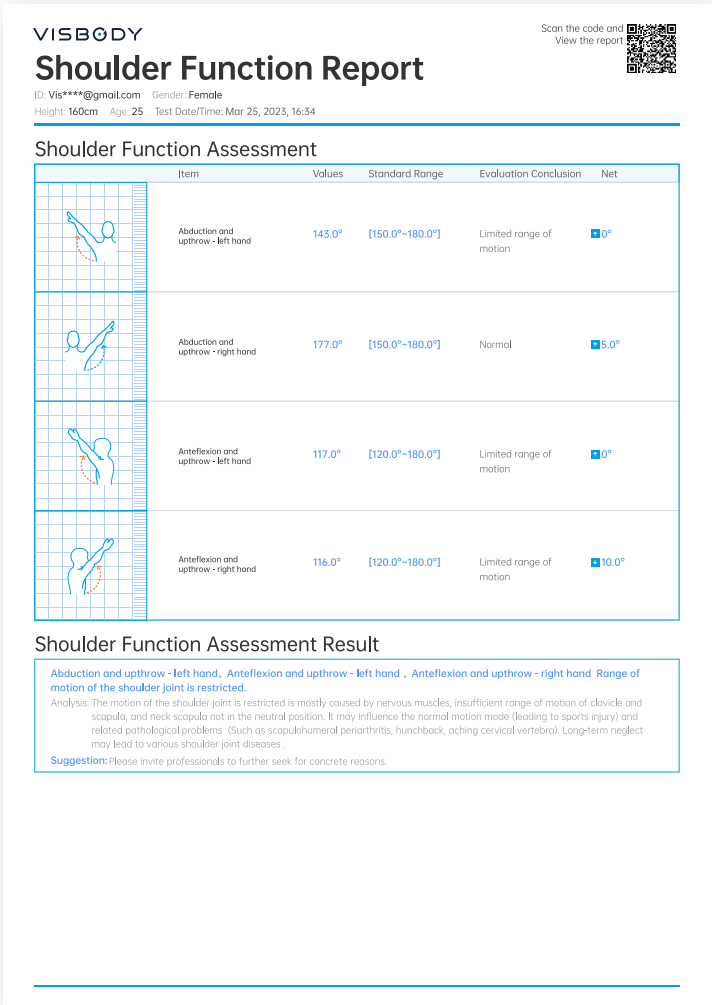

Измерение состава тела

Оценка состава тела имеет высокую референтную ценность для анализа состояния здоровья и качества питания. Технология BDA (анализ биоплотности) анализирует различные показатели состава тела, рассчитывая соотношение между общим объемом тела человека, распределением объема туловища и конечностей, а также массой тела, что позволяет определить плотность тела.

Visbody-M30 может выполнять 4 основных измерения параметров тела и предоставляет 4 сценария стабилизации состояния на основе рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения стандартов для поддержки здорового образа жизни.

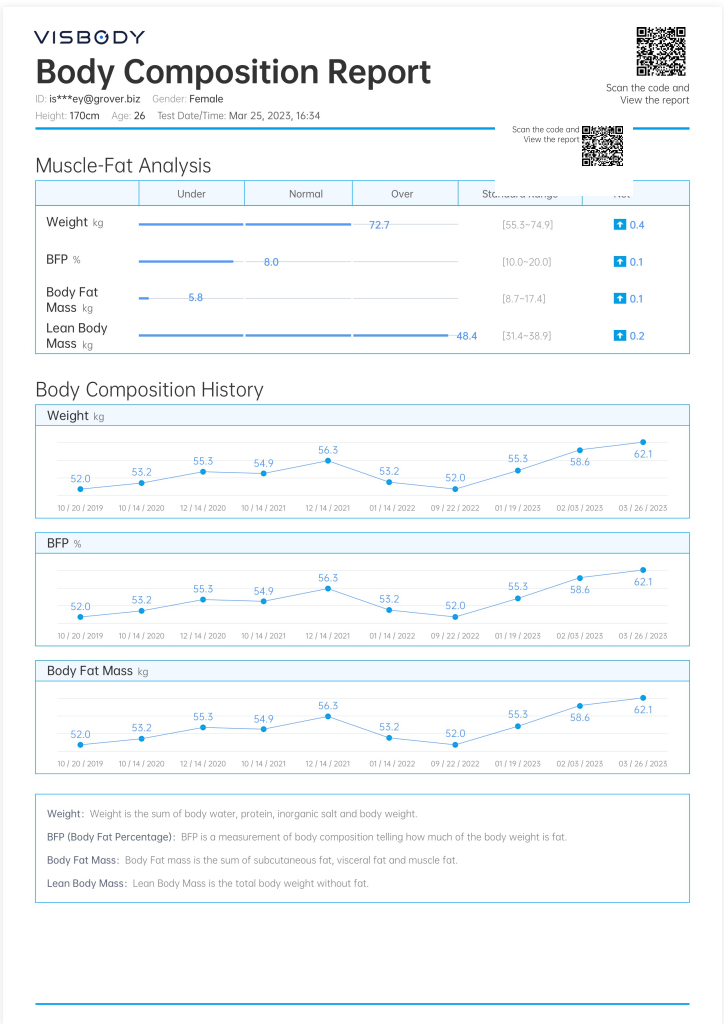

2. Допустимые параметры

Диапазон роста (Осанка и форма) : 130-200см

Диапазон роста (Динамика) : 130-192см

Максимальная нагрузка поворотной платформы: 180кг

⚠ Осторожно: не рекомендуется использование поворотной платформы пожилыми людьми и людьми, склонными к головокружению.



3. Технические характеристики

Питание: 24В === 5А

Рабочая температура: 0~40°C

Относительная влажность: 20%~90%

Температура хранения: -20~50 °C

Интерфейс сети: Ethernet

Максимальная нагрузка поворотной платформы: 180кг

Габариты:

Сканер: 1860мм (В) * 550мм (Ш) * 340мм (Т)

Вращающаяся платформа: 92мм (В), 450мм (ДИАМ)

Коврик: 1630мм (В), 600мм (Ш)

Вес

Сканер: 47кг


Вращающаяся платформа: 7кг

I Часть 2

Сборка устройства

1. Распаковка устройства

С помощью специальных инструментов вскройте деревянный ящик, достаньте содержимое и разместите на полу по отдельности все детали.

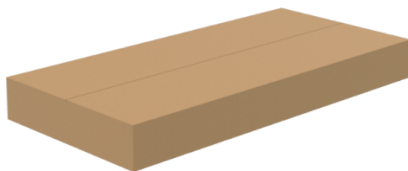

Разрежьте скотч на швах коробок

Удалите защитный слой пенопласта

Достаньте устройство и разместите его на полу лицевой стороной экраном вверх



Распаковка устройства (Сканер)

1. Переместите коробку туда, где будет установлено устройство.
2. Раскройте коробку по центру.
3. Удалите первую часть пенопласта
4. Поднимите устройство из коробки, держа его с обеих сторон, и положите на пол
5. Достаньте оставшиеся компоненты из коробки: коврик, постер и т.д.


Распаковка устройства (стойка и весы)

1. Переместите коробку туда, где будет установлено устройство.
2. Раскройте коробку по центру.
3. Удалите первую часть пенопласта
4. Достаньте стойку, весы, коврик и пакет с аксессуарами из коробки и положите на пол.




Распаковка устройства (Поворотная платформа)

1. Переместите коробку туда, где будет установлено устройство.
2. Раскройте коробку по центру.
3. Удалите первую часть пенопласта.
4. Достаньте поворотную платформу с проводами из коробки и положите на пол.

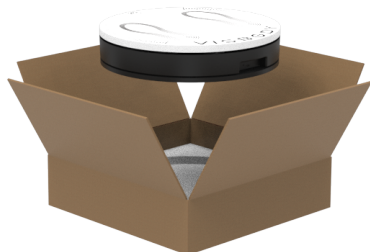

2. Установка устройства

1) Коврик следует положить на твердую поверхность, при этом он должен лежать совершенно ровно. Вокруг коврика должно быть 40–60 см свободного пространства, чтобы пользователи могли стоять на поворотной платформе, разведя руки в стороны под углом 30 градусов.

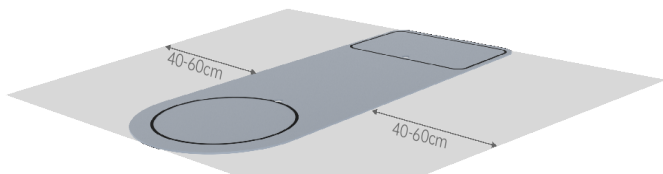

2) Устройство и поворотную платформу следует установить в определенной точке, отмеченной заранее с расчетом свободного пространства для отведения рук.




3) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на область камеры на передней панели при размещении устройства. Не размещайте устройство так, как показано на рисунках. Если вам необходимо разместить его рядом с окном, обязательно используйте светонепроницаемые шторы, чтобы обеспечить нормальное использование устройства.

4) Освещение в помещении, где находится устройство, должно быть ярким. При слабом освещении после включения появится напоминание\ошибка на экране.

3. Сборка устройства

1) Коврик

Положите коврик на пол в правильном положении, пропустите шнур питания и кабель связи поворотной платформу через зазор в коврике и расположите его под ковриком так, чтобы были видны только два конца. как показано ниже:

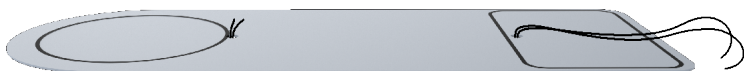

2) Поворотная платформа

Установите поворотную платформу на круглую область, отмеченную на коврике.




3) Установка базы

Установите базу в прямоугольную зону на коврике.




4) Установка стойки

⚠ Внимание: у стойки есть передняя и задняя стороны. На задней стороне есть две отметки, как показано на рисунке ниже. Закрепите крепежные штифты в отмеченных местах и соберите переднюю часть с зеркалом [как показано на рисунке (5) ниже].

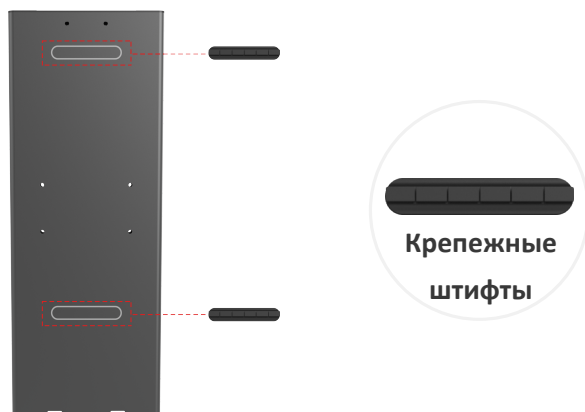


Установите стойку вертикально и вставьте ее в гнездо базы, а затем затяните шесть винтов, чтобы соединить стойку и базу.

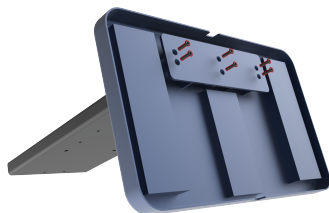

⚠ Рекомендация: Перед установкой стойки упорядочьте провода базы. Сначала пропустите шнур питания и кабель связи поворотной платформы сквозь круглое отверстие в коврик-ке базе, а затем пропустите их через два отверстия в передней и задней части базы.

5) Установка основного модуля

Под модулем находится длинный металлический крюк. Зацепите крюк в пазу над стойкой, а затем затяните шесть винтов, чтобы соединить стойку с зеркалом.

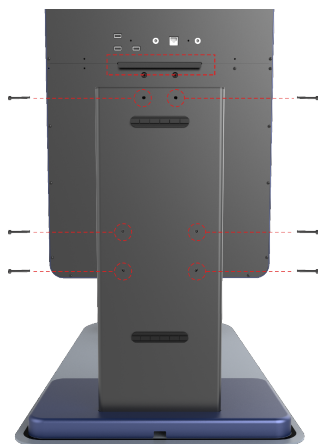

5) Установка зеркала



6) Крепление ремешков

6) Крепление ремешков

Зафиксируйте один конец ремешка (длина регулируется) в задней части устройства с помощью 2 винтов. Другой конец фиксируется на стене с помощью клеящегося материала или стенового крепления (рекомендуемое расстояние между стеной и устройством - 15-25 см).

 **Внимание:** перед началом эксплуатации зафиксируйте ремешки, чтобы предотвратить падение устройства вперед.

7) Настройка поворотной платформы

Подключите один конец шнура питания и кабеля связи в соответствующие разъемы в пазу на передней панели поворотной платформы, а другой конец кабеля связи — в USB-разъем на задней панели устройства. Подключите шнур питания к источнику питания.

8) Включение питания:

Подключите шнур питания устройства и кабель сети в задней части устройства.

9) Включение:

После включения питания переключатель в задней части устройства загорится красным, нажмите кнопку включения питания на боковой стороне стойки, чтобы включить его.

4. Подключение принтера

Подключите принтер в USB-разъем в задней части устройства.

Примечание: Visbody поддерживает только одобренные модели принтеров. Если принтер не работает после подключения, свяжитесь с представителем Visbody, чтобы уточнить, поддерживается ли данная модель принтера.

*Примечания для проводных сетевых подключений

Устройство должно быть подключено к кабелю сети. Минимальные требования к сети для нормальной работы устройства: пропускная способность более 20 Мбит/с, а также скорость исходящего и входящего трафика не менее 2 Мбит/с (обратите внимание, что эта пропускная способность должна использоваться только VR-устройством). Если вы не уверены, обратитесь в службу поддержки Visbody для проверки сети.

【Шаблон электронного письма】

Кому info@visbody.com

От кого

Тема: Проверка сети

Часть 3

Подготовка к эксплуатации

1. Регистрация

Перейдите на сайт: <https://assistant.visbody.com> для получения доступа к платформе Wellnesshub. Войдите в свою учетную запись, используя имя пользователя и пароль. Если у вас нет учетной записи, вы можете подать заявку на регистрацию на платформе Wellnesshub.

В правом верхнем углу можно переключать языки. Поддерживаются следующие языки: китайский, английский, японский, испанский, немецкий, турецкий, французский, арабский, голландский, итальянский, португальский, тайский, традиционный китайский (Тайвань), традиционный китайский (Гонконг), русский, индонезийский и греческий.



1.1. Запрос доступа к платформе Wellnesshub

Нажмите кнопку «Подать заявку» в нижней части страницы входа, чтобы перейти на страницу подачи заявки. Данная страница поддерживается на ПК, мобильных устройствах и планшетах. После ввода указанной ниже информации вы сможете подать заявку. После завершения проверки результаты будут опубликованы на веб-странице заявки и отправлены по электронной почте.

1.1.1. Ввод информации

Для получения доступа и подачи заявки на регистрацию, перейдите по ссылке <https://assistant.visbody.com/sign>

Данные учетной записи

- Имя пользователя: введите свое имя пользователя.
- Страна/регион: выберите актуальную для вас страну/регион.
- Часовой пояс: выберите свой часовой пояс.
- Адрес: введите свой полный адрес.
- Email: введите актуальную электронную почту для получения кода подтверждения.

- Код подтверждения: введите код подтверждения, полученный по электронной почте.
 - Сфера деятельности: введите свою сферу деятельности.
 - Контактное лицо: введите имя контактного лица.
 - Подтверждение пароля: повторно введите свой пароль для входа.
- Примечание: имя учетной записи нельзя изменить. Будьте внимательны при вводе.

← Back

Visbody WellnessHub

English ▾

Apply to join Visbody WellnessHub

Please fill out all information and submit. We will review and activate the platform as soon as possible

1 Account Info

2 Device Info

3 Account Settings

• Username

Please enter

000

• Country/Region

Please select Country/Region

▾

• Time zone

Please select Time zone

▾

• Address

Please enter

0000

• Email

Please enter

• Verification code

00

Get Code

Industry

Please select (or enter custom input)

▾

Contact Name

Please enter

000

Phone number

Please enter

000

Next

← Back

Visbody WellnessHub

English ▾

Apply to join Visbody WellnessHub

Please fill out all information and submit. We will review and activate the platform as soon as possible

✓ Account Info

1 Device Info

3 Account Settings

• Equipment Nameplate

Sample image

+

Upload

Clear and upload full nameplate photos with dimensions up to 1024x1024 and max 5MB

• Model Number

Select Device Type

▾

• Device ID#

000

PreviousNext

Already have an account, sign in

← Back

Visbody WellnessHub

English ▾

Apply to join Visbody WellnessHub

Please fill out all information and submit. We will review and activate the platform as soon as possible

✓ Account Info

✓ Device Info

1 Account Settings

• Account Name

changings@visbody.com

2550

• Login password

8/31

• Confirm Password


8/31

PreviousNext

Already have an account, sign in


1.1.2. Рассмотрение


Отображение статуса в процессе рассмотрения.

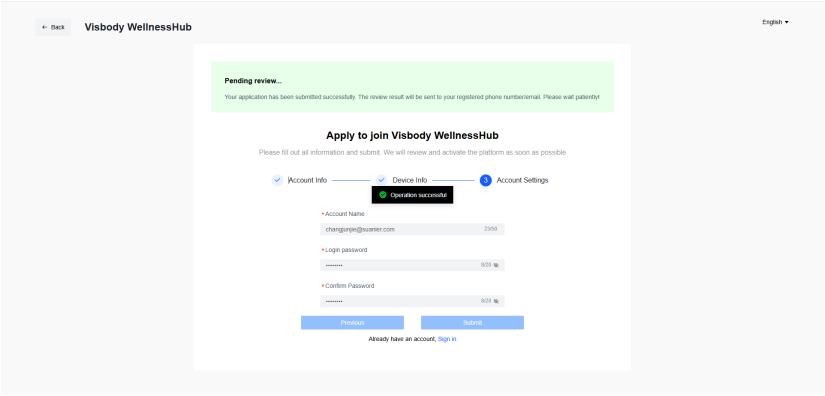

1.1.3. Одобрение

Результаты проверки будут опубликованы на странице заявки и отправлены по электронной почте. После одобрения вы сможете войти в систему.

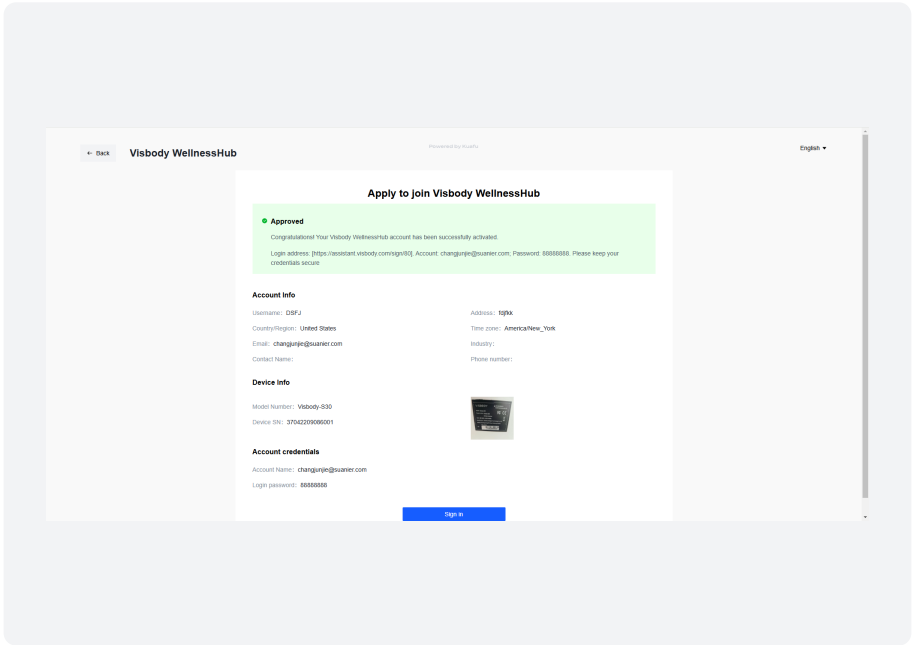

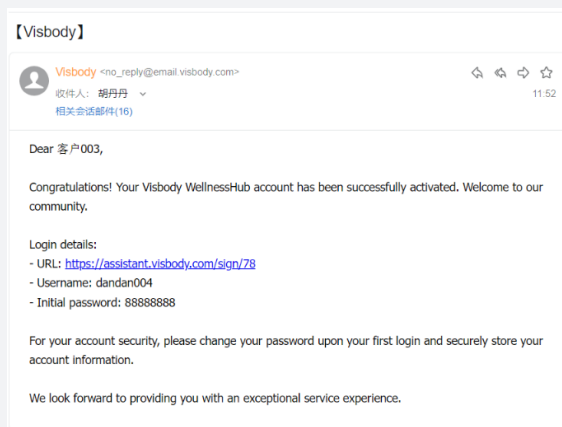

1.2. Забыли пароль

Если пользователь забыл пароль, он может ввести уникальный идентификатор своей учетной записи (адрес электронной почты для международных доменов, номер телефона для внутренних доменов). После проверки можно сбросить пароль.

A screenshot of the Visbody WellnessHub password reset page. The page has a header with a 'Back' button and the text 'Visbody WellnessHub'. On the right, there is a language selector showing 'English'. The main content area is a form titled 'Please enter the Email associated with this account'. It contains four sections: 1. 'Email' with a text input field 'Enter your email address to bind'. 2. 'Verification code' with a text input field 'Please enter verification code' and a 'Get Code' button. 3. 'New Password' with a 'Confirm Password' field and a strength indicator '(95%)'. 4. 'Confirm Password' with a 'Confirm password' field and a strength indicator '(95%)'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Change password'.

2. Управление облачным сервисом

При первом входе в систему тип предприятия для пользователей установлен по умолчанию, как «Одно предприятие». Нажмите «Изменить», чтобы изменить информацию о предприятии.

2.1. Редактирование данных предприятия

- Название предприятия: актуальное название предприятия.
- Отрасль: отрасль, в которой работает клиент (настраиваемая).
- Адрес предприятия: актуальный адрес предприятия.
- Страна: необходимо выбрать актуальную для пользователя страну.
- Часовой пояс: выберите подходящий часовой пояс на основе расположения.
- Email: актуальный электронный адрес пользователя.
- Должность сотрудника: ввод должности сотрудника предприятия.
- Обращение: ввод обращения к сотруднику предприятия.
- Горячая линия для консультаций: контактный номер телефона предприятия.
- Имя контактного лица: имя контактного лица на предприятии.
- Номер телефона контактного лица: номер телефона контактного лица на предприятии.

Данные для входа

- Имя учетной записи: имя пользователя предприятия для входа на платформу Wellnesshub.
- Данные для входа: просмотр и изменение пароля.

Конфигурация стиля платформы

- Visbody Wellnesshub: настройка отображения названия платформы.
- Конфигурация логотипа платформы: настройка отображения логотипа платформы.

Конфигурация отчета об измерениях

- Логотип на печатном отчете: загрузка логотипа для печати на отчетах.
- Единицы измерения: установка метрической или британской системы измерения. Применяются ко всем устройствам на предприятии.
- Отображение информации пользователя: контроль отображения электронной почты/ телефона в отчетах.
- Отображение оценок в отчетах: контроль отображения оценок измерения в отчетах.
- Стандарты состава тела: конфигурация стандартов расчета состава тела для устройств Visbody-S30 и Visbody-EXP (не применяется к другим устройствам).

store management

 store Information Management

Report Management

 User Information Binding
 Report List
 User Management

Device Management

 Device List

System Settings

 Role Management
 Account Management
 Payment History

management / Information Management

store information

store name

店003

5/50

Industry

General Fitness

2/100

Country/Region

China

Asia/Shanghai

Email

hudadan@suarier.com

Staff Title

coach

Student Name

Student

Please enter your service hotline

0/50

Contact Name

Enter contact name

0/20

Please enter contact's mobile number

0/20

store management

 store Information Management

Report Management

 User Information Binding
 Report List
 User Management

Device Management

 Device List

System Settings

 Role Management
 Account Management
 Payment History

Platform Style Configuration

Visbody Wellnesshub

Please enter

0/50

Note: After configuration the platform name of this store will be changed to the configured content

Platform Logo Settings

+

Upload

After uploading, the Logo will be displayed in the top left corner, replacing visbody image. If deleted, default logo will be displayed.
Please upload image materials in ".png" format

Note: After configuration, the store logo will be replaced with the configured image

Measurement Report Settings

Paper Report Logo Settings

+

Upload

(After successful upload, the logo will appear on the fitness test report, deleting the logo will remove it from display)
Please upload a .png image with dimensions 320x160 pixels and file size under 200kb

Reporting Unit

Metric units (cm, kg)

store management

 store Information Management

Report Management

 User Information Binding
 Report List
 User Management

Device Management

 Device List

System Settings

 Role Management
 Account Management
 Payment History

Measurement Report Settings

Paper Report Logo Settings

+

Upload

(After successful upload, the logo will appear on the fitness test report, deleting the logo will remove it from display)
Please upload a .png image with dimensions 320x160 pixels and file size under 200kb

Reporting Unit

Metric units (cm, kg)

Show user info

yes

Show report score

yes

Body composition standards

WHO (World Health Organization) Standards

[Change Log](#)


1. Only effective for Visbody 630 and Visbody 640 devices.
After modifying the standards, the changes will take effect in newly generated reports.

Confirm

Cancel

3. Запуск устройства

Нажмите клавишу включения питания (POWER) на правой боковой стороне устройства, чтобы включить его. Время включения составляет около 30 секунд. После появления сообщения о запуске устройство начнет самопроверку для автоматической калибровки.


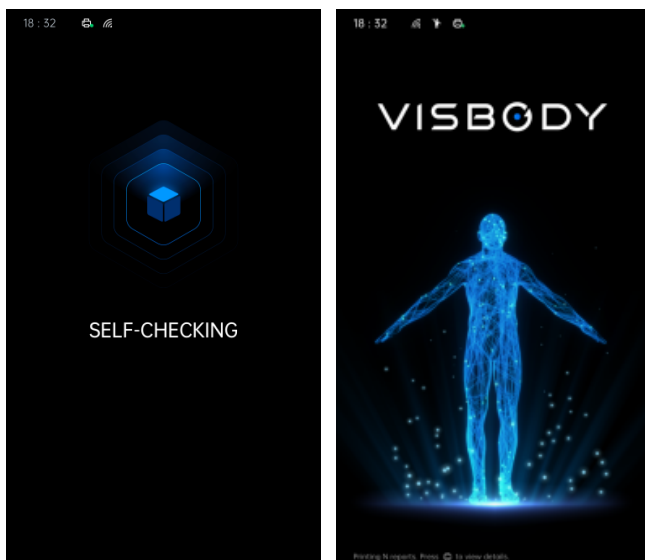


Часть 4 Инструкции

1. Условия эксплуатации

Чтобы гарантировать точность результатов измерения, соблюдайте следующие условия:

- Наденьте облегающую одежду.

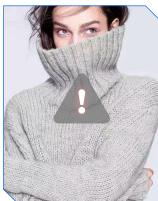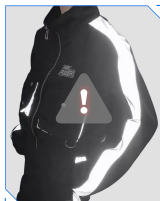

2. Инструкция по эксплуатации

Действия пользователя

Выполните следующие действия, следуя инструкциям в голосовых подсказках и подсказках на экране. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выполнить все тесты по порядку или выбрать некоторые из них:

Оценка осанки

- Встаньте на поворотную платформу, стойте неподвижно 2 секунды до начала оценки;
- Стойте неподвижно с руками по швам, после 3-секундного обратного отсчета поворотная платформа начнет вращаться.

Оценка округности тела

- Встаньте на поворотную платформу, стойте неподвижно 2 секунды до начала оценки;
- Стойте неподвижно с руками под углом 30° , после 3-секундного обратного отсчета поворотная платформа начнет вращаться.



Оценка осанки



Оценка округности тела

Динамическое отслеживание

Встаньте на поворотную платформу. Посмотрите видео с демонстрацией движений и повторите их после 3-секундного обратного отсчета.




Динамическое отслеживание

3. Форма отчета

Устройство предоставляет два варианта просмотра отчета: режим администратора (режим по умолчанию) и просмотр по коду на мобильно устройстве.

⚠ Примечание: Для просмотра по коду необходимо настроить получение отчетов в меню настроек, выбрав «QR-код».

*Инструкцию по настройке сканирования кода см. в разделе [Настройка функций].

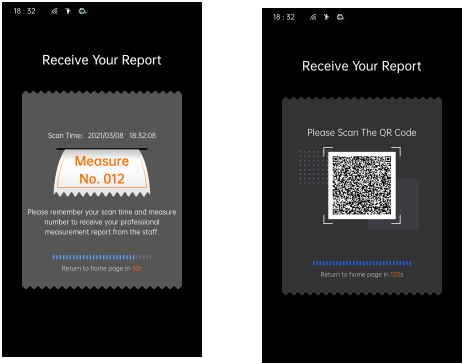


Действия администратора

Зайдите на страницу WellnessHub: <https://assistant.visbody.com>, используя учетную запись администратора, для просмотра отчета.

Записи измерений пользователя будут появляться синхронно и поочередно после завершения сканирования. Когда администратор подтвердит личность пользователя по номеру или времени сканирования, необходимо нажать на запись о тестировании, чтобы привязать адрес электронной почты пользователя.


Шаг 1

Введите данные пользователя для привязки. Если у пользователя уже есть учетная запись, система автоматически заполнит регистрационные данные после ввода адреса электронной почты. Проверьте и подтвердите их.

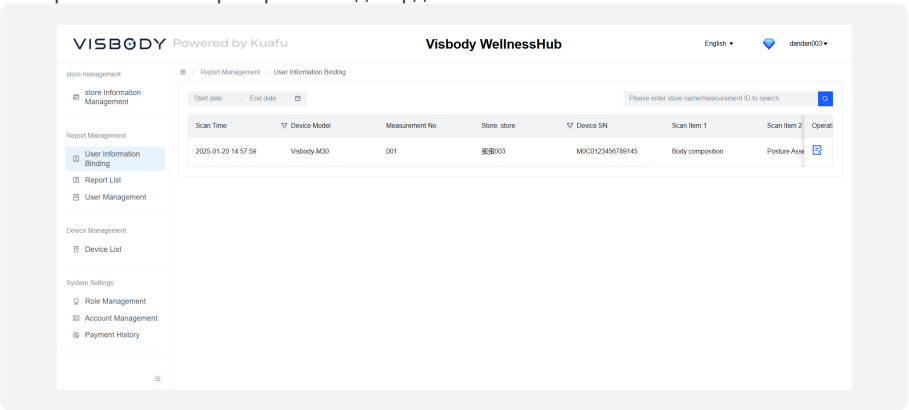


Шаг 2

После привязки выберите «Предварительный просмотр данных» в списке отчетов и проверьте числовые значения в поле предварительного просмотра.

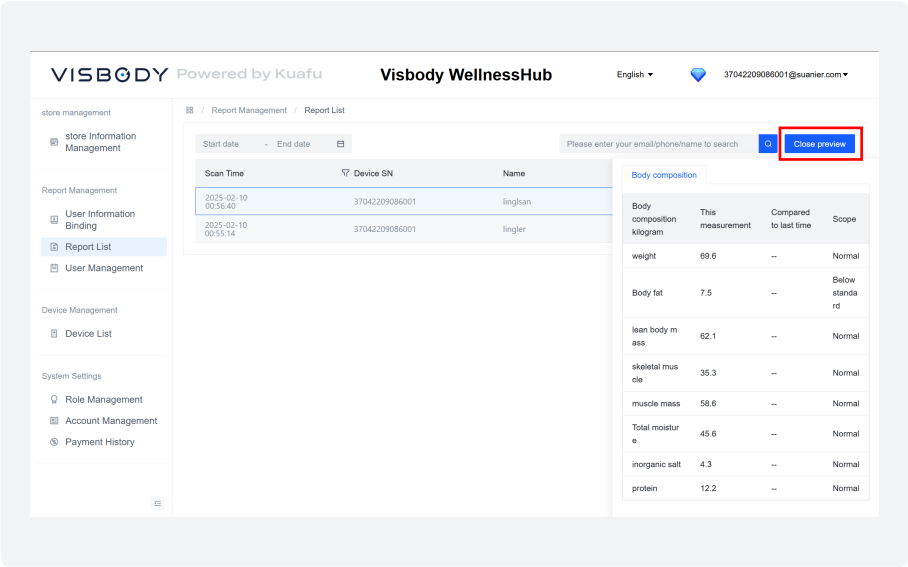

Или просмотрите отчет напрямую.

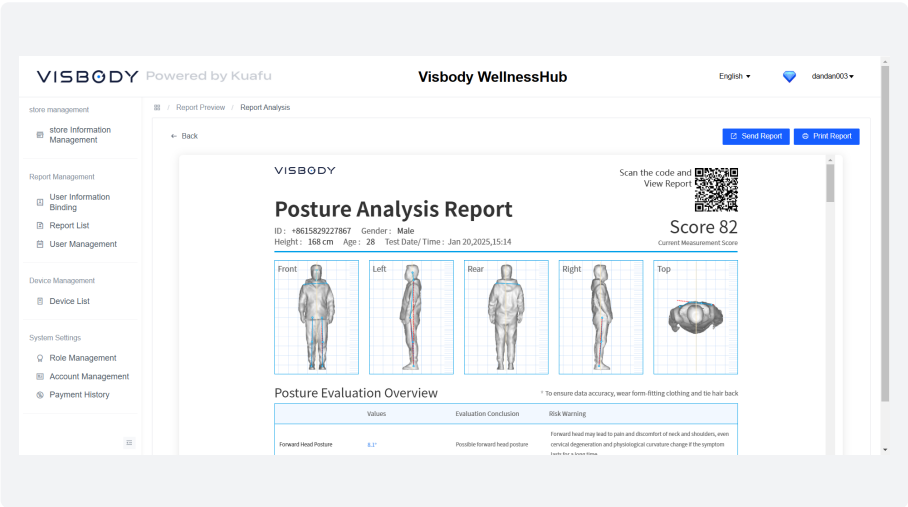

Сканирование QR-кода для просмотра на мобильном устройстве

Откройте любое приложение для сканирования QR-кода (браузер, WeChat или приложение для сканирования кода от iPhone и т. д.), чтобы просканировать код и просмотреть отчет.

Новым пользователям необходимо создать учетную запись, чтобы перейти на страницу просмотра отчетов с мобильного устройства.

Выберите «Мобильный телефон» или «Электронная почта» для регистрации. Если вы выбрали вариант «Мобильный телефон», выберите код страны и введите номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты. Нажмите «Получить код подтверждения», введите полученный код подтверждения и нажмите «Зарегистрироваться/Войти» внизу страницы, чтобы открыть новую страницу. Введите имя, пол, рост и возраст, поставьте галочку «Я согласен с Политикой конфиденциальности» и нажмите «Отправить», чтобы завершить регистрацию.

Visbody

Sign up / Log in English ▾

Mobile phone accounts and email accounts are independent of each other. Please pay attention to your account type.

Phone Email

+81 ▾ Enter your phone number

Verification Code Enter verification code Send

☐ Remember me

Sign up / Log in

Visbody

Sign up / Log in English ▾

In order to have the accurate data, it's important to put in the right height, gender and age.

Name John Mobbin

* Gender Male Female

* Height 7 ft 4 in Metric

* Age 28

☒ I agree (Privacy Policy)

Submit

Если у вас уже есть учетная запись, необходимо перейти на страницу входа после сканирования кода, ввести номер мобильного телефона и проверочный код для входа (для этого необходимо указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

⚠ Подсказки:

1. Если вы не хотите каждый раз вводить номер мобильного телефона или адрес электронной почты для входа в систему, вы можете поставить галочку «Запомнить меня» ниже при входе в систему и в следующий раз при использовании того же браузера вы войдете в систему автоматически.
2. Рекомендуем нашим клиентам добавить данную страницу в закладки, чтобы облегчить последующий доступ к отчету.

4. Печать отчета

Метод 1 : Печать через Wellnesshub

Зайдите на wellnesshub, чтобы посмотреть отчет об измерениях и нажмите «Печать отчета» на странице отчета, чтобы распечатать его.

⚠ Примечание: при использовании компьютера для входа в систему администратора Visbody убедитесь, что он подключен к принтеру через USB или облачный терминал.



Метод 2: Печать через устройство

Подключите принтер в USB-порт в задней части устройства.

⚠ Примечание: Visbody поддерживает только определенные модели принтеров. Если принтер не работает после подключения, свяжитесь с представителем Visbody, чтобы уточнить, поддерживается ли данная модель принтера. Нажмите клавишу печати на домашней странице устройства, чтобы перейти к списку отчетов, выберите соответствующий отчет, нажмите клавишу подтверждения "✓" для печати.


*Инструкции по автоматической настройке печати см. в разделе «Настройки функций».

I Часть 5

Функции и обновления


Нажмите и удерживайте клавишу подтверждения "✓" на домашней странице, чтобы перейти в меню настроек.

После завершения настройки нажмите клавишу питания дважды, чтобы быстро вернуться на домашнюю страницу.

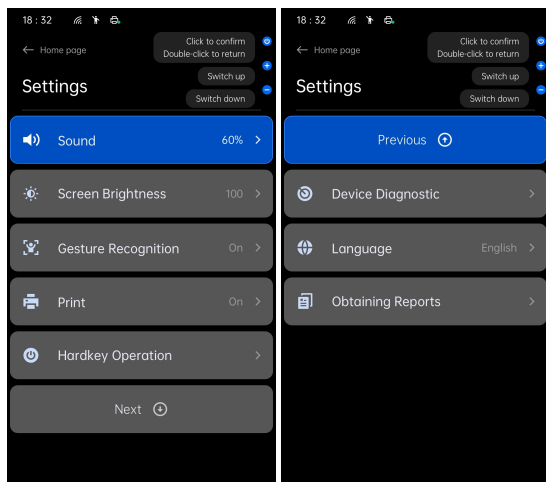


1. Настройка звука

После выбора пункта «Звук», нажмите клавишу "+" чтобы увеличить, или "-", чтобы уменьшить громкость устройства.

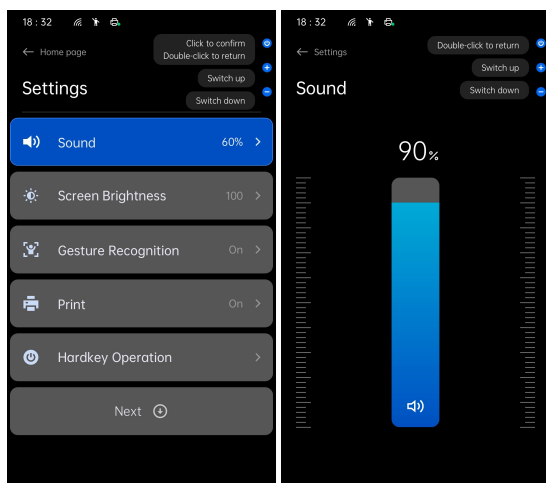

2. Настройка яркости экрана


После выбора пункта «Яркость экрана», нажмите клавишу "+" чтобы увеличить, или "-", чтобы уменьшить яркость экрана.

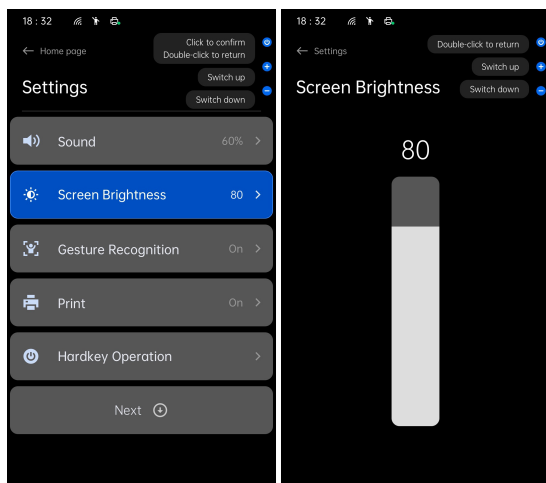

3. Пользовательские режимы

Visbody поддерживает два режима взаимодействия: режим клавиш и режим жестов. Клавиши расположены на правой боковой стороне устройства. Функция распознавания жестов включена по умолчанию, и процедуры тестирования тела можно завершить с помощью жестов и клавиш.

Если необходимо отключить режим распознавания жестов, выполните следующие действия:

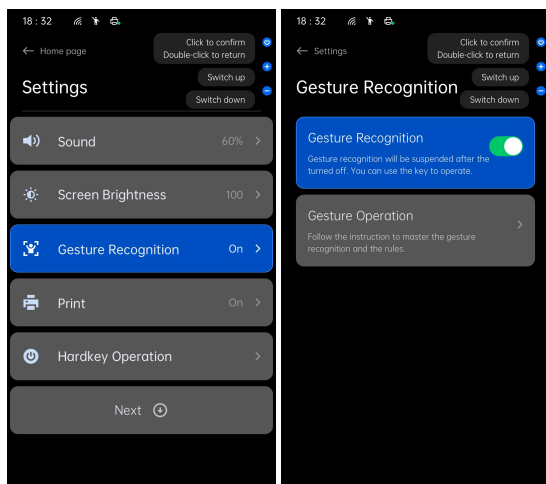

Выберите «Распознавание жестов» и нажмите клавишу питания один раз, чтобы выключить распознавание жестов.


⚠Примечание: Плохое освещение в помещении может привести к сбоям в распознавании жестов. Если временно невозможно отрегулировать освещение, отключите функцию «Распознавание жестов».

4. Настройка режимов печати

По умолчанию установлен ручной режим печати. Вы можете выбрать ручной режим печати или режим автоматической печати.


- Выберите «Печать» на странице настроек.
- Выберите «Автоматическая печать».

После настройки и успешного подключения к принтеру Visbody будет автоматически печатать данный тестовый отчет каждый раз, когда вы привязываете информацию о пользователе на панели управления.

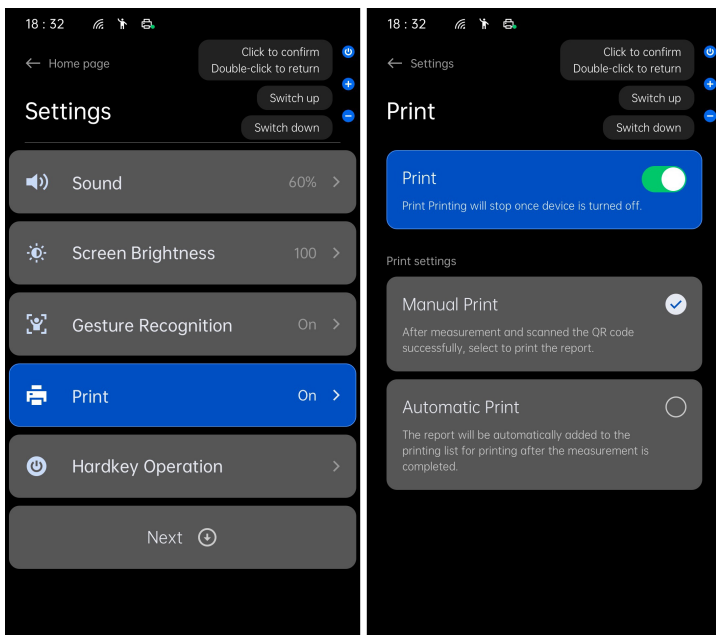

5.Использование кнопок


Три кнопки расположены на правой боковой стороне экрана: кнопка включения питания, «+», «-». Выбор меню «Использование кнопок» поможет пользователям освоить различные способы взаимодействия с тремя кнопками на разных страницах.

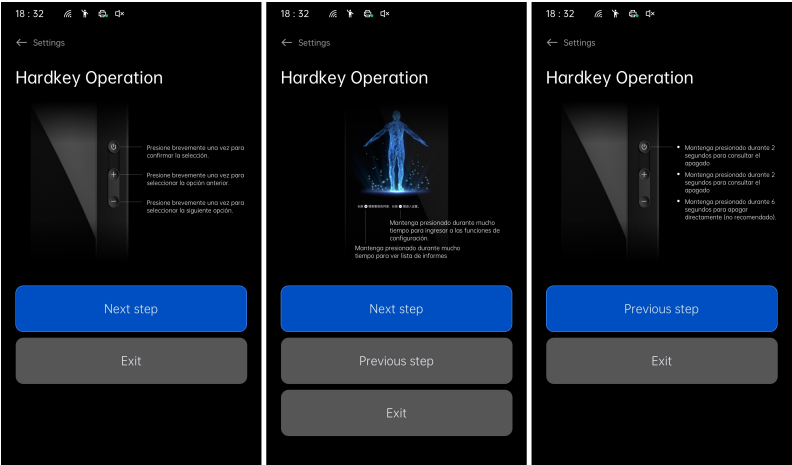

6. Диагностика устройства


6.1 Диагностика сети

Диагностики статуса подключения устройства к сети.

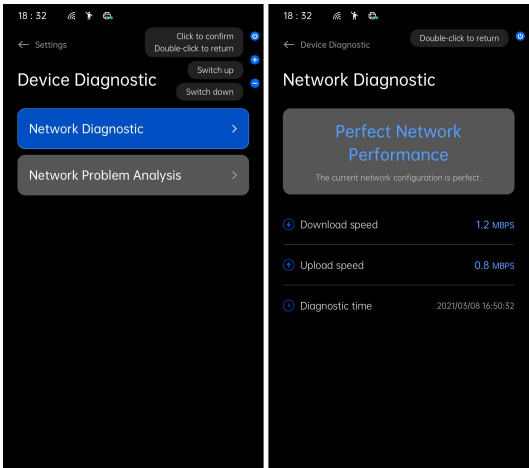


6.2 Анализ проблем сети

При обнаружении неполадок сети необходимо включить автоматическую функцию анализа проблем сети под руководством инженера по послепродажному обслуживанию или торгового представителя Visbody. После отображения результатов необходимо сделать фотографии и отправить их инженеру по послепродажному обслуживанию Visbody.

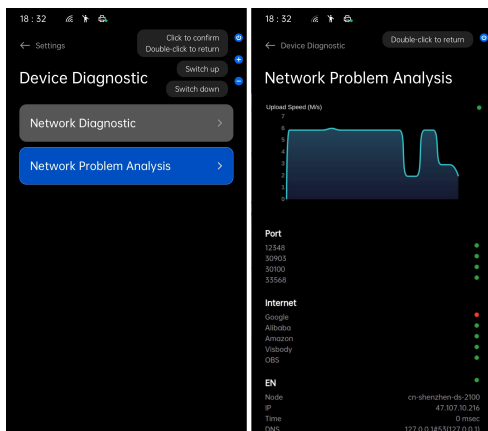

7. Выбор языка

Выберите необходимый язык из списка доступных языков.

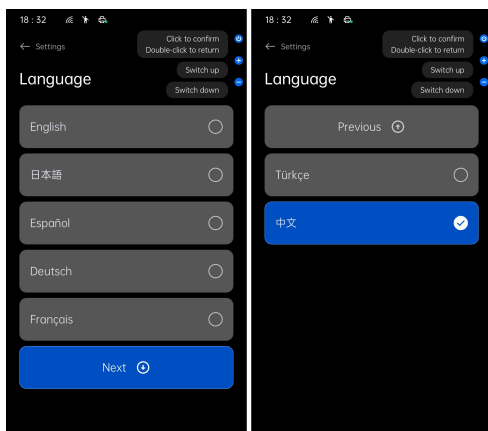


8. Метод получения отчетов

По умолчанию для получения отчетов используется [серийный номер измерения]. Здесь вы можете выбрать метод сканирования для получения отчета.

- Выберите «Получить отчет» в меню настроек;


- Выберите «QR-код» и завершите настройку.

Следующий отчет об измерении будет доступен для просмотра с помощью приложения для сканирования (браузер, WeChat, встроенное приложение для сканирования кода в iPhone и т.д.)

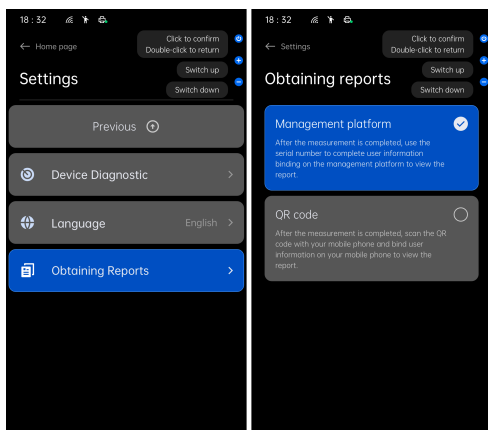

9. Обновления

Visbody поддерживает последнюю версию системы благодаря онлайн-обновлениям. Если на вашем устройстве появится запрос на обновление, выполните его. Не используйте устройство во время обновления.

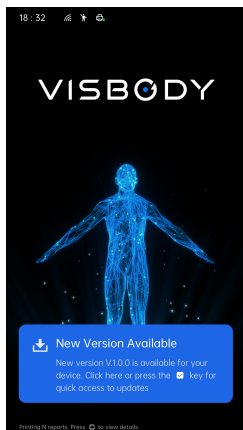

Дополнительная информация об устройствах

Если у вас возникли вопросы о компании, вы можете посетить наш официальный сайт www.visbody.com для онлайн-консультации или загрузить дополнительные инструкции по использованию продукции.

www.visbody.com



